




7invensun aSee Pro桌面式眼动分析系统

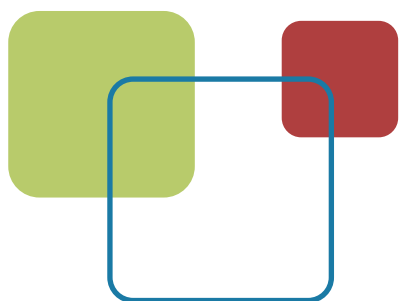

7invensun aSee Pro桌面式眼动分析系统

相关链接



产品简介

7invensun aSee Pro桌面式眼动分析系统

aSee Pro桌面式眼动仪,采用基于人眼三维模型的遥测式注视点追踪算法,无需固定头部,即可在55cm-80cm的距离范围内精准计算注视点坐标。使用配套的aSee Studio分析软件,支持图片、视频、录屏等素材的添加和实验设计,满足实验管理、设计、采集、分析的一体化需求。

场景

使用计算机显示器呈现各类刺激材料,在被试不穿戴任何设备的情况下记录其眼动数据。

产品优势

高频率,满足研究需要

头动范围大

支持单眼/双眼追踪

轻便,安装简易

自由设计实验内容

开发与OEM支持



aSee Studio眼动分析软件

桌面式眼动仪的配套软件,集工程管理、实验设计、数据采集、AOI绘制、数据分析等功能于一体

交互逻辑友好、操作便捷,提供眼动分析的全过程支持





产品特点

交互逻辑友好, 层次分明的工程管理界面
 实时监测被试浏览刺激材料的注视点信息
 自定义校准, 适用婴儿、色盲等不同人群
 注视热图回放
 注视轨迹图回放
 绘制AOI, 一键统计经典眼动指标
 各类图表直观呈现眼动数据信息



结构管理 实验工程管理功能, 实验、测试、被试变量快速设置, 一目了然	实验设计 快速添加刺激材料, 支持自定义呈现时长、跳转模式等功能	实验录制 记录图片、视频、屏幕等材料的同时, 精准采集被试的眼动指标	分屏观察 主试屏幕可实时监控被试屏幕上的注视点信息, 掌握实验进程
校准方案 包含智能校准、婴儿校准等功能, 自主设置校准点颜色、圈套	可视化结果 实验录制回放, 注视轨迹图, 注视热图等可视化结果的呈现	AOI AOI绘制 支持静态/动态AOI的控制, 自定义形状大小, 一键统计数据	数据支持 提供毫秒级时间戳、注视点坐标、瞳孔直径等20余项数据, 导出格式可选

产品规格

采样率	100Hz / 140Hz / 150Hz
准确度	<0.5°
可用距离	55~80cm
头动范围	17*22@68cm (双眼追踪) 25*22@68cm (单眼追踪)
连接方式	USB3.0
追踪技术	角膜反射法
最佳屏幕尺寸	24寸
操作系统	Win8 / 10

虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔科技有限公司

SouVR中国站: <http://www.souvr.com> / www.souvr.cn

SouVR国际站: <http://en.souvr.com>

电话: 010-50951355

手机: 13811546370 / 13720091697 / 13720096040
13811548270 / 13811981522 / 18600440988
13810279720 / 13581546145

地址: 北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦
B1-103

